


Bischoff & Bischoff


Manual de instrucciones

Delta B



Enjoy mobility.

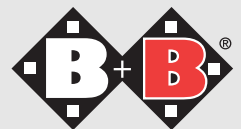

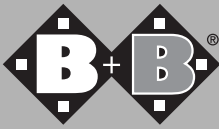

Delta B

(Andador tres ruedas con freno de cable)

Estimado cliente:

Con la adquisición de este andador B+B usted dispondrá de un producto alemán de primera calidad que ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas ocasiones.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del andador B+B y así sentirse más seguro.


Deseamos que nuestro producto le permita disfrutar de una mayor movilidad.

1. Atención: indicaciones de seguridad (Análisis de riesgo según DIN EN 13485)

- 100 kg de capacidad de carga máxima
- Condúzcalo solo en superficies llanas y horizontales
- Asegúrese de que la presión de los neumáticos sea de 2-2,5 bar
- Respete la profundidad de inserción mínima de las barras del manillar (marca). Cada freno solo funciona sobre una rueda motriz
- No utilice productos de limpieza agresivos ni corrosivos.
- Llévelo al distribuidor cada 6 meses para que revise los frenos.



- Empuñadura
- Barra del manillar
- Cesta accesoria
- Cierre rápido
- Mecanismo de pliegue
- Rueda directriz
- Palanca de freno
- Fijación de la barra del manillar
- Cable de freno

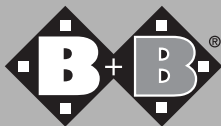

2. Cómo desplegar el andador

- Coloque ante sí el andador B+B en la dirección de la marcha.
- Sujete ambas empuñaduras del andador B+B y tire de ellas hacia fuera.
- Para bloquear el mecanismo de pliegue, presione el cierre rápido hacia abajo con el pulgar hasta que llegue al tope.

Al plegar el andador, tenga cuidado de no pillarse partes del cuerpo o de la ropa.

3. Cómo plegar el andador

- Coloque ante sí el andador B+B en la dirección de la marcha.
- Sujete una empuñadura con una mano y tire ligeramente hacia arriba del cierre rápido con la otra mano.
- Apretando las empuñaduras entre sí se pliega el andador.

4. Cesta accesoria

La cesta accesoria está colgada en la barra del manillar en la dirección de la marcha.

5. Cómo ajustar las empuñaduras

El andador B+B está desplegado.

- Accione el freno de estacionamiento (véase el punto 5.2).
- Desenrosque el tornillo de plástico de las barras del manillar hasta que las empuñaduras se muevan libremente.
- Colóquese detrás del andador B+B con los brazos

colgando.

- Ajuste las empuñaduras de forma que queden a la altura de las muñecas.
- Vuelva a apretar los tornillos de plástico una vez realizado el ajuste.

Respete la profundidad de inserción mínima de las barras del manillar (mín. 8cm).

6. Cómo accionar y ajustar los frenos

6.1. Freno de servicio

El freno de servicio se acciona en las empuñaduras con las palancas del freno de mano.

6.2. Freno de estacionamiento

El freno de estacionamiento también se acciona a través de las palancas del freno de mano.

- Presione las palancas del freno de mano hacia abajo hasta que note que encajan.
- Para volver a activar el freno de estacionamiento, simplemente tire hacia arriba de las palancas del freno de mano y el freno se desbloqueará automáticamente.




Atención:

cada freno solo funciona sobre una rueda motriz.

6.3. Cómo ajustar los frenos

Puede ajustar los frenos directamente desde la palanca de freno y/o el cable Bowden. El freno está bien ajustado cuando la palanca de freno no tiene holgura.

La zapata de freno no puede entrar en contacto con la rueda motriz sin accionar la palanca de freno.

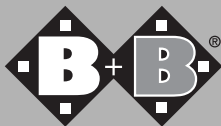

- Para ajustar más el freno hay que desenroscar el tornillo moleteado del dispositivo de freno y apretar la tuerca moleteada en sentido inverso.
- Al realizar los ajustes en el cable Bowden, primero hay que aflojar la tuerca moleteada (M6).
- Posteriormente se desenrosca el casquillo roscado hasta encontrar el ajuste correcto. Para que no varíe el ajuste, hay que volver a apretar el casquillo roscado con la tuerca (M6).
- Para que el freno quede más blando, hay que efectuar el proceso descrito de forma inversa.

7. Ruedas y neumáticos

En las ruedas de 8" hay montados neumáticos de poliuretano.

8. Datos técnicos

Modelo: Delta B (DGW)

Color: rojo o azul metalizado

Longitud: 56 cm

Anchura: 68 cm

Plegado: 26 cm

Peso: 6,6 kg sin cesta

- Empuñaduras con forma anatómica
- Freno de servicio y freno de estacionamiento combinados.
- Estructura de acero sólida y recubrimiento anticorrosivo.
- Barras del manillar resistentes a la torsión, ajustables gradualmente entre 80 y 94 cm.
- Neumáticos de 8"

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Delta B

Número de serie:*

(debe anotar el distribuidor)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

