


# **Bischoff & Bischoff**


Manual de instrucciones

## **DH-40 Round**



Enjoy mobility.

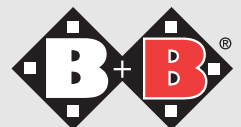

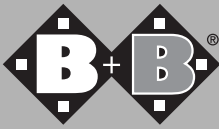

## **DH-40 Round (Silla de ducha)**

### **Estimado cliente:**

Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que le facilitará el cuidado en casa.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia para la ducha B+B y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

## **1. Declaración de conformidad**

En calidad de fabricante del producto, B+B declara que la silla de ducha DH-40 Round cumple íntegramente los requisitos de la directiva 93/42/CEE.

## **2. Información para la utilización del producto**

La silla de ducha DH-40 Round está exclusivamente diseñada para sentarse durante la ducha.

## **3. Finalidad de uso - Indicaciones**

Inestabilidad/incapacidad de mantenerse en pie por una menor utilización o una falta de funcionalidad de las extremidades inferiores (p. ej., por la pérdida de fuerza a causa de enfermedades malignas, así como enfermedades pulmonares y cardiovasculares avanzadas y crónicas) combinado con una debilidad postural del tronco.

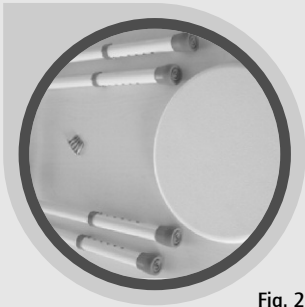


Fig. 2

#### **4. Atención: indicaciones de seguridad, análisis de riesgo según DIN EN 13485**

- Se requiere la ayuda de otra persona para sentarse y levantarse.
- Ajuste las 4 bases a la misma altura.
- Asegúrese de la correcta colocación de los pernos de retención.
- Tenga cuidado de no aplastarse los dedos al fijar la superficie de asiento en el armazón del asiento.
- La superficie de asiento solo sirve para sentarse.

#### **5. Cómo ensamblar y montar el asiento**

Introduzca las barras telescópicas en las ranuras de la superficie de asiento y fíjelas con los 5 tornillos cilíndricos tal como se muestra en la figura.

Barras telescópicas

Superficie del asiento

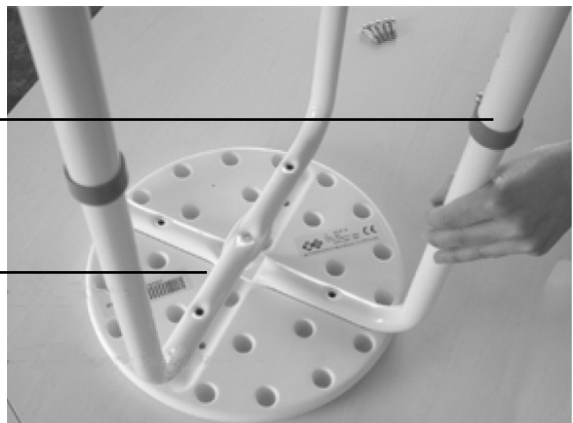


Fig. 3

## 6. Cómo ajustar la altura del asiento


Es posible ajustar la altura de ambas bases en 6 niveles (intervalo de ajuste de cm). Para ello presione el perno de retención y desplace la base telescópica hasta la posición deseada. Al quedar cubierto, el perno de retención encaja automáticamente con el orificio de bloqueo. Las cuatro bases deben ajustarse a la misma altura.

## 7. Limpieza y desinfección de la silla de ducha

Limpie y desinfecte la silla solo con productos convencionales.



Fig. 4

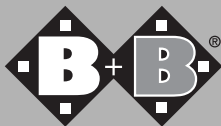

## 8. Datos técnicos

- 120 kg de capacidad de carga máxima
- An./al./pr. (en mm): 420/420/440-540
- Peso: 1,7 kg
- Altura del asiento: 440-540 mm en 6 niveles mediante el perno de retención
- Anchura/profundidad de la superficie de asiento: 330/330 mm
- Color: blanco

## 9. Identificación del producto

En el reverso de la superficie de asiento del producto hay un adhesivo identificativo en el que figura el nombre del producto, el número de serie, el peso máximo del usuario y la dirección de la empresa.

## 10. Garantía

Solo se asumirá la garantía si el producto ha sido utilizado en las condiciones indicadas y para los fines previstos. El producto debe devolverse en el embalaje original.

## 11. Suministro del equipamiento de serie

- 1 × superficie de asiento de plástico B+B
- 2 × barras telescópica con bases de altura regulable
- 5 × tornillos cilíndrico M6 × 28 según DIN 84

## **Certificado de garantía**

(Observe nuestras condiciones generales)

**Modelo:** Silla de ducha DH-40 Round

**Número de serie:\***

(debe anotarlo el comercio especializado)

**Distribuidor:**

**Fecha y sello**

\* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

## **MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.**

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

## **el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

