


Bischoff & Bischoff


Manual de instrucciones

TS-Care



Enjoy mobility.

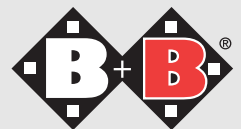

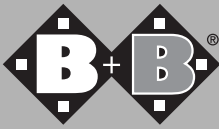

Silla para baño sin ruedas „TS-Care“

Estimado cliente:

Con la adquisición de la silla para baño B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas ocasiones.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento de la silla para baño B+B y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de nuestro producto.

1. Atención: indicaciones de seguridad (Análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485)

- Peso máximo del usuario: 120 kg.
- Utilice la silla para baño siempre con la ayuda de otra persona.

2. Indicaciones

Falta de control del tronco, alteraciones del equilibrio, pérdida de funcionalidad en las extremidades inferiores, rigidez de las caderas y de la columna, mancos, tetraplégicos o personas con lesiones en los brazos y con graves alteraciones de la función de prensión.

3. Suministro

La silla TS-Care se suministra completamente montada.

4. Sumario general

- Respaldo
- Reposabrazos acolchado
- Superficie de asiento acolchada
- Acolchado del asiento con apertura
- Orinal
- Dispositivo de bloqueo para regular la altura del asiento



Fig. 1

5. Asiento

Para una limpieza fácil de la silla, puede extraerse el acolchado del asiento. Antes de cada uso, asegúrese de que la superficie de asiento esté bien fijada al armazón (las 3 pinzas de bloqueo deben encajar claramente).



Tenga cuidado de no aplastarse los dedos.

6. Orinal

Puede cambiar o vaciar fácilmente el orinal extrayéndolo del soporte previsto situado en la parte trasera de la silla para baño.

El orinal no desprende olor con la tapa cerrada.

7. Cómo regular la altura del asiento

Para regular la altura del asiento de la silla, afloje los pernos de retención de las 4 bases y ajuste la posición deseada. La altura del asiento puede regularse en 5 niveles.



Atención:
ajuste las 4 bases a la misma altura.



Fig. 2



Fig. 3


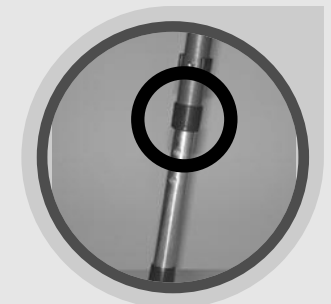


Fig. 4

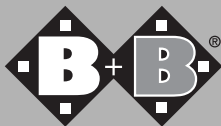

8. Mantenimiento

Si realiza un mantenimiento periódico de la silla para baño B+B, esta conservará un buen aspecto durante años. En caso de suciedad extrema, es aconsejable utilizar productos de limpieza o desinfectantes convencionales.

No utilice productos de limpieza agresivos ni corrosivos.

9. Datos técnicos

- Anchura del asiento: 40 cm
- Profundidad del asiento: 42 cm
- Altura del asiento: 50-60 cm
(regulable en 5 niveles)
- Altura del reposabrazos: 19,5 cm (16 cm con la superficie de asiento)
- Altura del respaldo: 32 cm (29 cm con la superficie de asiento)
- Datos generales (pr./an./al.): 54-55 cm/56,5 cm
/81,5-91,5 cm
- Peso total: 6 kg (7,7 kg con la superficie de asiento)
- Peso máximo del usuario: 120 kg

10. Garantía

Solo se asumirá la garantía si el producto ha sido utilizado en las condiciones indicadas y para los fines previstos. El producto debe devolverse en el embalaje original.

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Silla para baño TS-Care

Número de serie:*

(debe anotar el distribuidor)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

