


**Bischoff & Bischoff**


Mode d'emploi

**TSE-Easy 10**



Enjoy mobility.

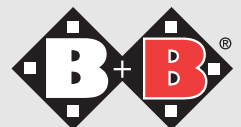

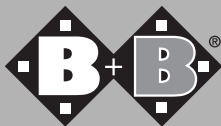

## **TSE-Easy 10 (Rehausse de siège de toilette)**


### **Chère cliente, cher client,**

La rehausse de siège de toilette B+B que vous venez d'acquérir est un produit allemand de grande qualité dont les fonctionnalités professionnelles sont largement reconnues. Le présent mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre planche de bain B+B et d'acquérir ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous espérons que notre produit vous apportera une grande satisfaction.

## **1. Attention – Consignes de sécurité!**

- Poids maximal autorisé 200 kg!
- Le poids maximal ne se réfère pas au couvercle de la lunette de toilette. Le couvercle n'est pas conçu pour servir de siège.
- La rehausse de siège de toilette n'est pas conçue pour servir d'assise permanente!
- Vérifiez que les vis de fixation sont correctement serrées!

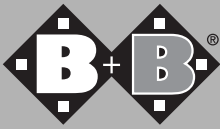

Couvercle de toilette

Clip

Lunette de toilette



TSE-Easy 10

## 2. Indications

L'utilisation de la rehausse de siège de toilette est indiquée chez les personnes présentant une absence de contrôle du tronc, des troubles de l'équilibre, des déficiences fonctionnelles majeures aux extrémités inférieures, des raideurs des hanches et de la colonne vertébrale, une amputation de main, une tétraplégie, un handicap du bras avec important déficit de la fonction de préhension.

## 3. Montage

- Introduisez la vis bleue en plastique dans le clip. Vérifiez que le filetage de la vis est bien inséré dans l'ouverture du clip.
- Insérez les éléments de fixation assemblés dans la rainure de la rehausse (figure 2)
- Tournez la vis en plastique avec une légère pression vers le bas pour la faire pénétrer dans le filet de la rehausse.

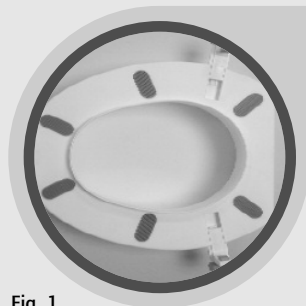



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

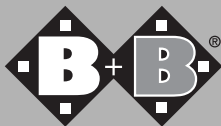

## 4. Montage

- Placez la rehausse TSE-Easy 10 sur vos toilettes.
- Fixez la rehausse TSE-Easy 10 à l'aide des clips à la cuvette des toilettes.

Vérifiez que les vis sont bien serrées et que la rehausse TSE-Easy 10 est ainsi parfaitement stabilisée sur les toilettes.

## 5. Nettoyage et désinfection

Recommandation pour la réutilisation: Pour nettoyer et désinfecter la rehausse TSE-Easy 10, utilisez un produit du commerce. N'utilisez aucun produit caustique.

## 6. Caractéristiques techniques

Largeur du siège:	36 cm
Profondeur du siège:	39 cm
Hauteur d'assise:	10 cm
Hauteur totale:	16 cm
Largeur totale:	40 - 48 cm
Profondeur totale:	40 cm
Poids:	1,5 kg
Poids de l'utilisateur:	200 kg
Accessoires:	2 clips

## Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

**Produit:** TSE-Easy 10

**Numéro de série:\***

(à compléter par le revendeur)

**Revendeur:**

**Date et tampon**

\* Les références se trouvent sur les côtés du châssis.

## **B+B France S.A.R.L.**

2 rue Hélène Boucher • Parc Ariane - Immeuble Saturne • F-78280 Guyancourt

Tél.: +33 0800/79 90 79 90 • Fax: +33 (0)1 61 38 35 89

[www.b-bfrance.fr](http://www.b-bfrance.fr)

[contact@b-bfrance.fr](mailto:contact@b-bfrance.fr)

## **constructeur: Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

